




FLEXANORM® Protection forme SET C



STERILE R
Utilisation conforme : Revêtement d'arc en C stérile conçu pour la durée d'une utilisation

1


Avant l'utilisation :
pour une meilleure adhérence
des surfaces adhésives,
nettoyer les surfaces latérales
de l'arc en C avec de l'alcool
isopropylique.

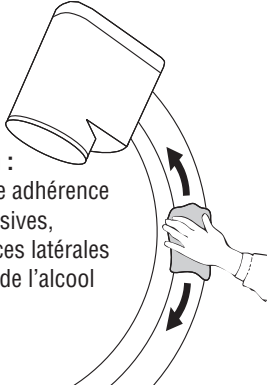

2

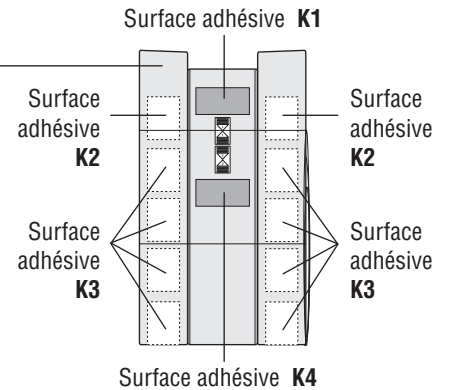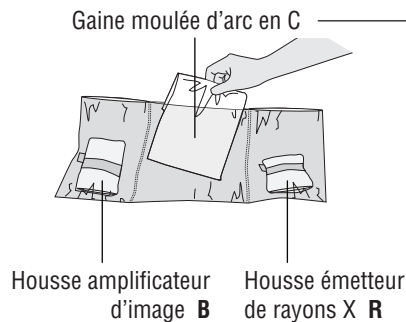


3

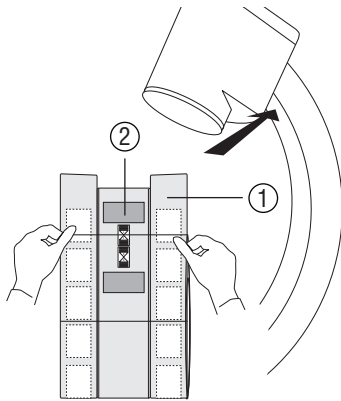


Avec les deux mains, placer le paquet
de l'arc en C (1) au milieu, détacher le
papier protecteur bleu de la surface
adhésive K1 (2).

4

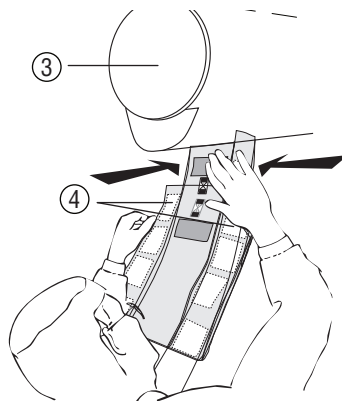

Bien coller le paquet de l'arc en C avec la surface
adhésive K1 au-dessous de l'amplificateur d'image (3).
Détacher le papier protecteur des surfaces adhésives
K2 (4) et le coller sur les côtés de l'arc en C.


5

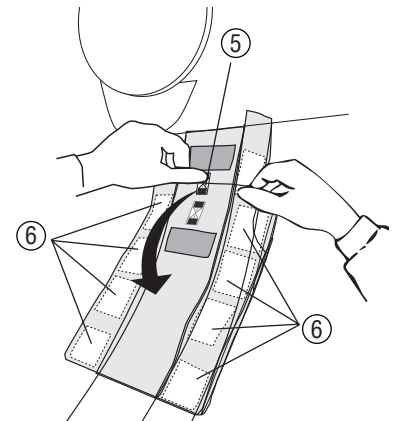


Ouvrir l'étiquette à flèche 1 (5) et déplier la
partie de film vers le bas. Détacher le papier
protecteur des surfaces adhésives K3 (6) et
le coller sur les côtés de l'arc en C.

6

Procéder de la même manière
avec l'étiquette à flèche 2,
entièrement déployer la pièce
formée et la coller avec la
surface adhésive K4 devant
l'émetteur de rayons X (7) et
sur les côtés de l'arc en C.

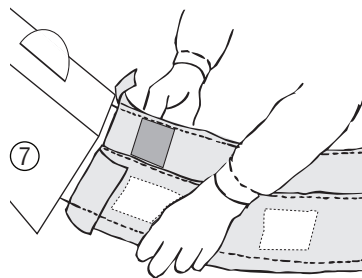

7

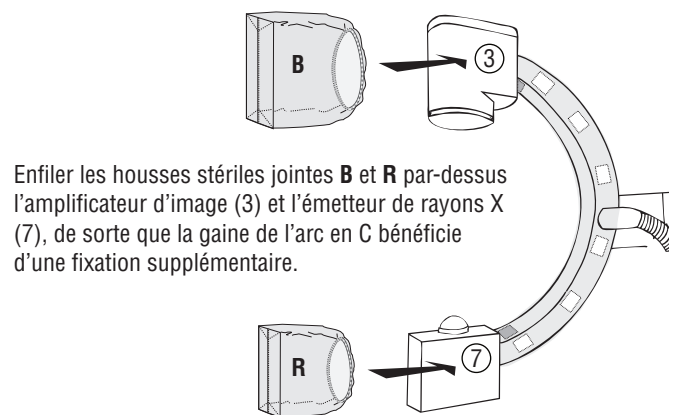

Enfiler les housses stériles jointes B et R par-dessus
l'amplificateur d'image (3) et l'émetteur de rayons X
(7), de sorte que la gaine de l'arc en C bénéficie
d'une fixation supplémentaire.



		COMPOSANTS							
		GAINÉ pour arc en C		HOUSSE pour amplificateur d'image (B)				HOUSSE pour émetteur de rayons X (R)	
		REF 34500	REF 34700	REF 30054	REF 30077	REF 30079	REF 30096	REF 30086	REF 30061
		Longitude: 165 cm	Longitude: 181 cm	Dimension: 40(+17)x60 cm	Dimension: 46(+24)x69 cm	Dimension: 49(+30)x75 cm	Dimension: 60(+40)x103 cm	Dimension: 49(+30)x100 cm	Dimension: 45(+17)x65 cm
LOTS 3 pièces	REF 34521	●		●					●
	REF 34531	●			●				●
	REF 34541	●				●			●
	REF 34551	●					●		●
	REF 34561	●						●	●
	REF 34731		●		●				●
	REF 34741		●			●			●

Une spécification détaillée du produit est disponible sur demande.

MISES EN GARDE et INFORMATIONS IMPORTANTES



Ne pas utiliser en cas de perte de stérilité ou si l'emballage est endommagé



ATTENTION : ne pas utiliser de produits endommagés !



Non réutilisable



Ne pas restériliser



ATTENTION : ne doit pas être réutilisé en raison d'un risque que les performances requises ne soient pas assurées et que le patient soit infecté .



ATTENTION : le mode d'emploi n'est valable que pour les produits ci-joints .



ATTENTION : ouvrir le sachet pelable au niveau de la couture supérieure !



Conserver au sec



Conserver à l'abri de la lumière solaire



ATTENTION : Ne s'appliquer que par un professionnel de santé !



ATTENTION : Tout incident grave lié au produit est signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi .

AUTRES SYMBOLES UTILISÉS



Stérilisé par irradiation



Date limite d'utilisation



Sans latex



www.heisig.de

Suivez le mode d'emploi. Le mode d'emploi actuel peut être téléchargé sur www.heisig.de



Nombre d'unités de consommation par sachet pelable



Numéro personnel du collaborateur chargé de la fabrication



Numéro de lot
AAMM0123



Fabricant



Nombre de sachets pelables par carton



Date de fabrication



Référence de la pièce

PZN: 000000

Numéro central pharmaceutique



Le produit est conforme aux exigences légales en vigueur pour les dispositifs médicaux. Le fabricant est contrôlé par l'organisme notifié portant le numéro 0197.



Dispositif médical



Système barrière *stérile* simple



Système barrière *stérile* simple avec emballage de protection extérieur



Respectueux de l'environnement en cas d'élimination appropriée. Aucun gaz toxique n'est produit lors de l'incinération. Mise à la décharge sans risque de pollution des eaux souterraines.

